



GH3 loftliftsystem

- med indbygget køremotor


GH3 er et stationært løftemodul, der er både brugervenligt og effektivt til løft og forflytninger i stort set alle plejemiljøer.

Løftemodulet oplades løbende i skinnerne, uanset hvor i skinnerne systemet befinder sig, hvilket sikrer, at loftliften altid er klar til brug.

GH3 kan leveres med en indbygget køremotor til sideværts bevægelse i traversskinne eller enkeltskinne, og styres enten fra håndbetjening eller via en infrarød (IR) fjernbetjening.

Herudover kan systemet være fuldt elektrisk, således at traversskinnen også kan styres med fjernbetjeningen.

Den trådløse, infrarøde fjernbetjening giver god kontrol og mulighed for at sende motoren væk samt kalde den tilbage efter behov. Håndbetjeningen er fortsat fastgjort til løftemodulet i tilfælde af, at den trådløse fjernbetjening bliver væk, tabt eller løber tør for batteri. Den vil derfor altid være inden for rækkevidde.

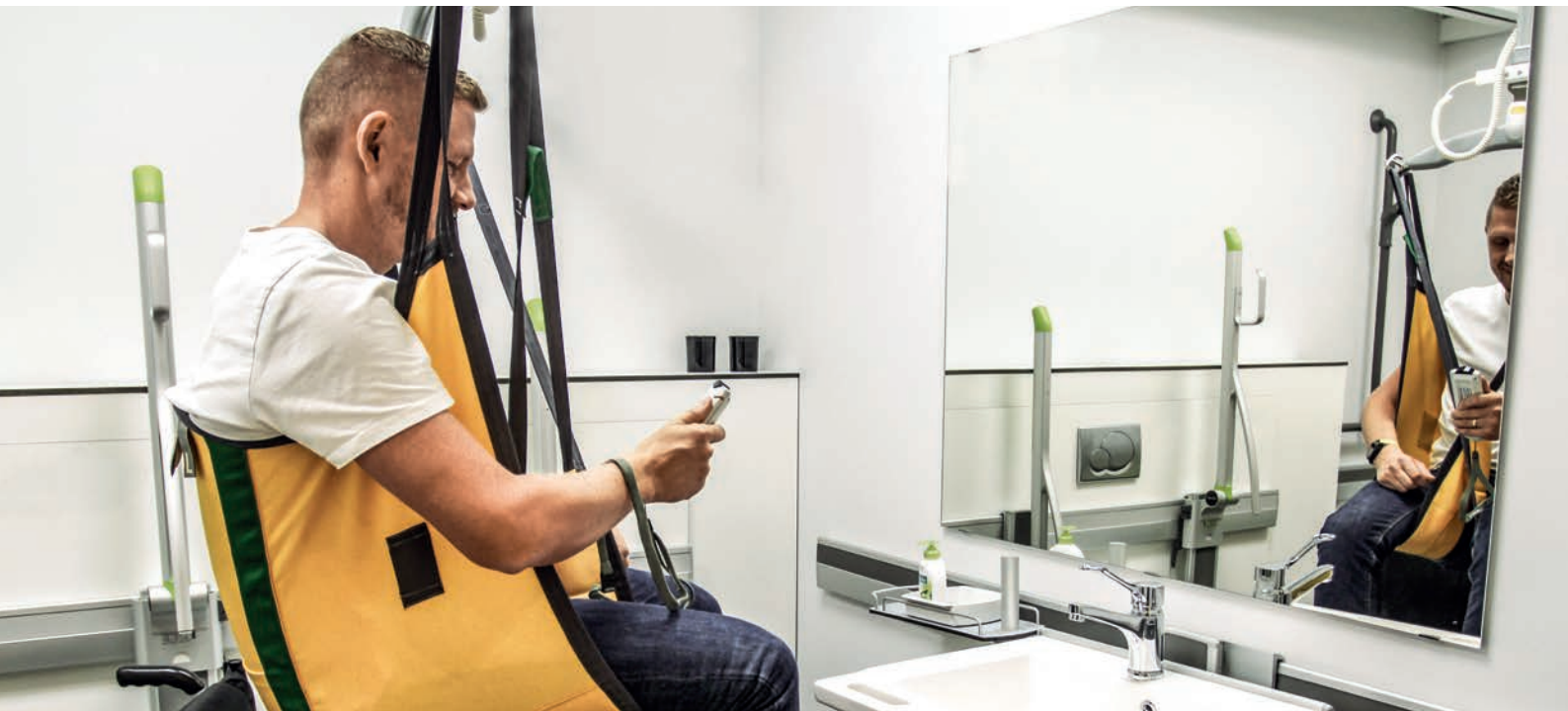

GH3 fås i flere varianter og kan konfigureres og tilpasses efter individuelle behov i forbindelse med funktionalitet og specifikationer.

Løftemodulet er nemt at betjene og gør de daglige løfte- og forflytningsprocedurer sikre og komfortable.

Kombineret med Guldmann's løftebøjler og løftesejl fra det omfattende tilbehørsprogram kan GH3 loftlift anvendes til mange forskellige løfte- og forflytningsopgaver, ligesom der kan udføres plejeopgaver samt mobiliserings- og rehabiliteringsøvelser efter behov.

- Sideværts forflytning i traversskinne/enkeltskinne
- Mulighed for at kunne styre traversskinnen
- Justerbar hastighed
- Mulighed for styring via infrarød fjernbetjening – (rækkevidde max. 20 m) og/eller fastgjort håndbetjening
- Muliggør uafhængig "selvhejsende" forflytning fra f.eks. seng til kørestol
- Nødfir og nødstop kan aktiveres af brugeren
- Blød start/stop bevægelse, hvor som helst i skinnen
- Altid klar til brug - automatisk opladning af løftemodulet i skinnerne

Time to care

V. Guldmann A/S
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.dk